


## Rossmax Temple Thermometer HA500

### Panduan Ringkas

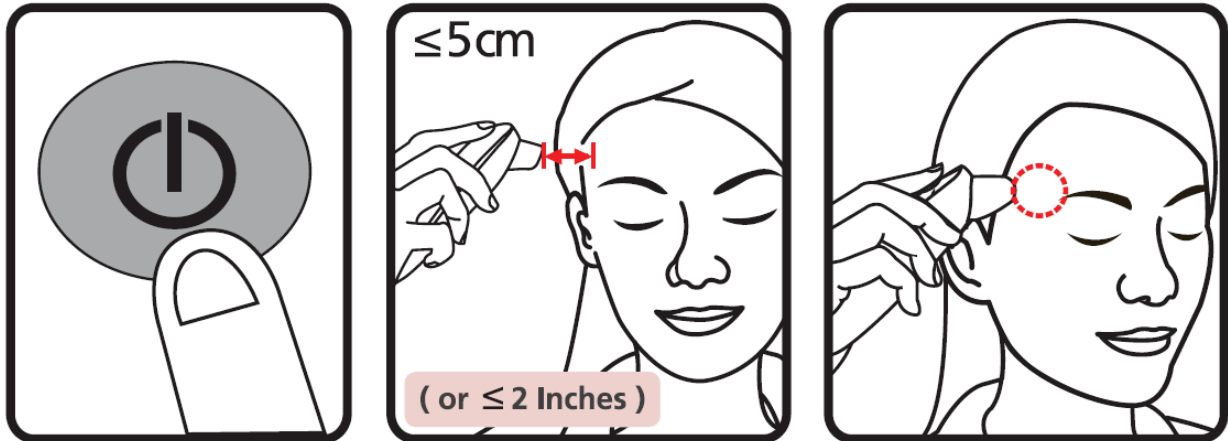


#### Cara mengukur suhu temples

1. Sentiasa memastikan lens bersih dan tanpa kerosakan.
2. Tekan "ON / OFF / Memory" untuk menghidupkan thermometer.
3. Menegak termometer ke arah temples dengan jarak kurang daripada 5 cm. Jika temples ditutup dengan rambut, peluh atau kotoran, sila membuang halangan dari temples untuk meningkatkan ketepatan pengukuran.
4. Tekan butang "Start" untuk mengambil suhu. Pengukuran selesai apabila anda mendengar bunyi bip panjang.
5. Baca suhu direkodkan daripada paparan LCD.
6. Bersihkan thermometer lens selepas setiap kali digunakan untuk memastikan bacaan yang tepat dan mengelakkan pencemaran silang. (Lihat bahagian Penjagaan dan pembersihan untuk maklumat lanjut.)
7. Sila simpan unit ke dalam kotak simpanan apabila tidak digunakan.

**Catatan: Sila rujuk kepada doktor untuk tafsiran keputusan**

#### Cara menukar Object mode dan Body mode

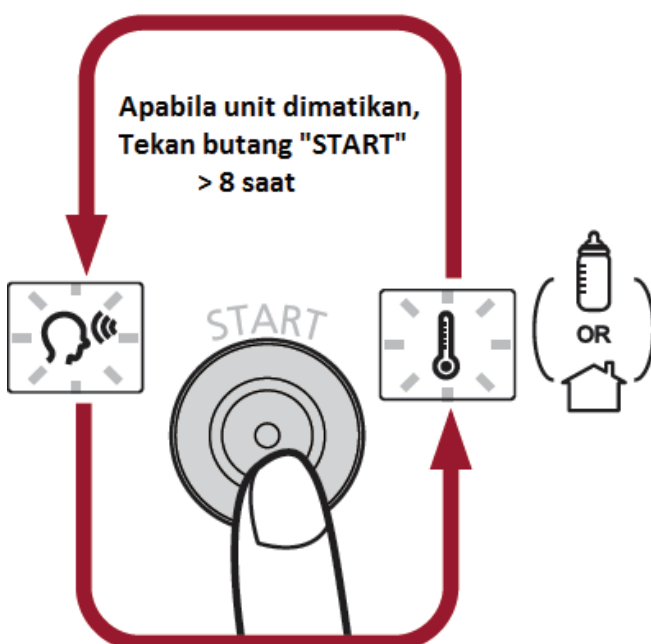

- Untuk tukar mode,
1. Sila matikan unit
  2. Tekan and tahan butang "START" melebihi 8 saat



**Awas:**

1. Hanya menggunakan unit ini apabila anda telah membaca dan memahami arahan penggunaan ini. Pastikan manual arahan untuk digunakan.
2. Termometer dan pesakit perlu tinggal di dalam bilik di mana ukuran yang diambil untuk sekurang-kurangnya 30 minit sebelum digunakan.
3. Anda disyorkan untuk sentiasa mengambil suhu di lokasi yang sama, kerana bacaan suhu boleh berbeza-beza mengikut lokasi.
4. Anda disyorkan mengambil pengukuran suhu tiga kali dan mengambil suhu yang tertinggi sebagai bacaan  
Jika :
  - a. Bayi yang baru lahir
  - b. Kanak-kanak yang mempunyai sistem imun yang lemah dan untuk siapa kehadiran atau ketiadaan demam adalah kritikal.
  - c. Apabila pengguna adalah belajar bagaimana untuk menggunakan termometer untuk kali pertama sehingga dia biasa dengan instrumen dan mendapat bacaan yang konsisten.
  - d. Bacaan adalah sangat rendah.
5. Jangan mengambil ukuran suhu badan sambil minum, makan, berpeluh atau bersenam.
6. Apabila mengambil unit daripada simpanan di bawah atau di atas 16 ~ 40 ° C (60.8 ~ 104 ° F), sila letakkan di dalam 16 ~ 40 ° C (60.8 ~ 104 ° F) julat suhu sekurang-kurangnya 30 minit sebelum digunakan.
7. Keluarkan bateri jika unit tidak akan digunakan untuk masa yang lama.

***Catatan: Sila rujuk kepada doktor untuk tafsiran keputusan***

