


Rossmax Thermometer HC700 (Malay Version)

Panduan Ringkas

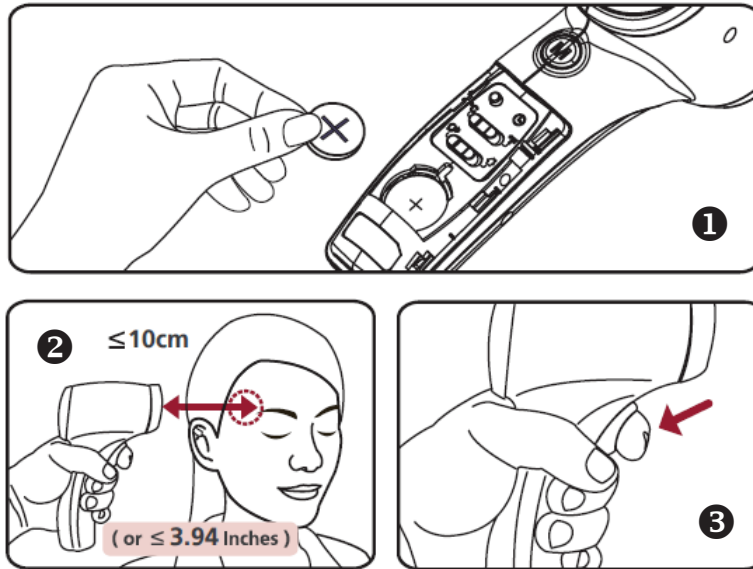

Cara mengambil pengukuran dengan betul?

1. Masukkan bateri
2. Menegak termometer ke arah temples dengan jarak kurang daripada 5 cm. Jika temples ditutup dengan rambut, peluh atau kotoran, sila membuang halangan dari temples untuk meningkatkan ketepatan pengukuran.
3. Tekan butang " Measuring Trigger " untuk mengambil suhu. Pengukuran selesai apabila anda mendengar bunyi bip panjang.
4. Baca suhu direkodkan daripada paparan LCD.


Temples Temperature - Termometer ini telah direka untuk kegunaan praktikal. Ia tidak bertujuan untuk menggantikan lawatan ke doktor. Sila bandingkan bacaan suhu dengan suhu badan biasa anda.

Object Mode - Object mode menunjukkan sebenar, suhu permukaan tidak diselaraskan, yang berbeza dari suhu badan. Ia boleh membantu anda untuk mengukur apa-apa objek selain daripada permukaan badan, contohnya susu bayi.

Fever Alarm - Jika termometer mengesan suhu badan $\geq 37.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($99.5\text{ }^{\circ}\text{F}$) anda akan terdengar empat bip bunyi dengan bacaan yang berkelip untuk memberi amaran kepada pengguna adalah demam



HC700 LCD Display

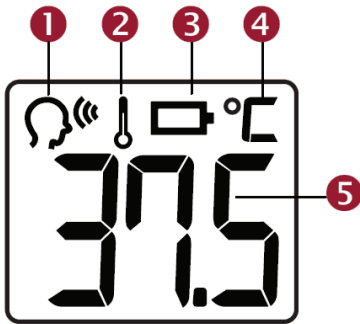

1. Mode pengukuran suhu badan
2. Mode pengukuran suhu objek
3. Bateri
4. °C/°F skala
5. Paparan suhu

Turning the buzzer On/Off



Tekan untuk hidup/mati bunyi buzzer

Switching between °C and °F



Tekan untuk penukaran Celsius (°C) dan Fahrenheit (°F)

Switching between body and object temperature mode



Tekan untuk penukaran Badan Mode (👤) dan Objek Mode (🌡️)

Awas:

1. Hanya menggunakan unit ini apabila anda telah membaca dan memahami arahan penggunaan ini. Pastikan manual arahan untuk digunakan.
2. Termometer dan pesakit perlu tinggal di dalam bilik di mana ukuran yang diambil untuk sekurang-kurangnya 30 minit sebelum digunakan.
3. Anda disyorkan untuk sentiasa mengambil suhu di lokasi yang sama, kerana bacaan suhu boleh berbeza-beza mengikut lokasi.
4. Anda disyorkan mengambil pengukuran suhu tiga kali dan mengambil suhu yang tertinggi sebagai bacaan
Jika :
 - a. Bayi yang baru lahir
 - b. Kanak-kanak yang mempunyai sistem imun yang lemah dan untuk siapa kehadiran atau ketiadaan demam adalah kritikal.
 - c. Apabila pengguna adalah belajar bagaimana untuk menggunakan termometer untuk kali pertama sehingga dia biasa dengan instrumen dan mendapat bacaan yang konsisten.
 - d. Bacaan adalah sangat rendah.
5. Jangan mengambil ukuran suhu badan sambil minum, makan, berpeluh atau bersenam.
6. Apabila mengambil unit daripada simpanan di bawah atau di atas 16 ~ 40 ° C (60.8 ~ 104 ° F), sila letakkan di dalam 16 ~ 40 ° C (60.8 ~ 104 ° F) julat suhu sekurang-kurangnya 30 minit sebelum digunakan.
7. Keluarkan bateri jika unit tidak akan digunakan untuk masa yang lama.

Catatan: Sila rujuk kepada doktor untuk tafsiran keputusan

